


**Model Pro 500
Diplomat Consul DC 310.**

Упрощение.

**Встречайте установку
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.**

**Встречайте установку
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ,
которая поможет
упростить работу
Вашей клиники.**

**Model Pro 500
Diplomat Consul DC 310**

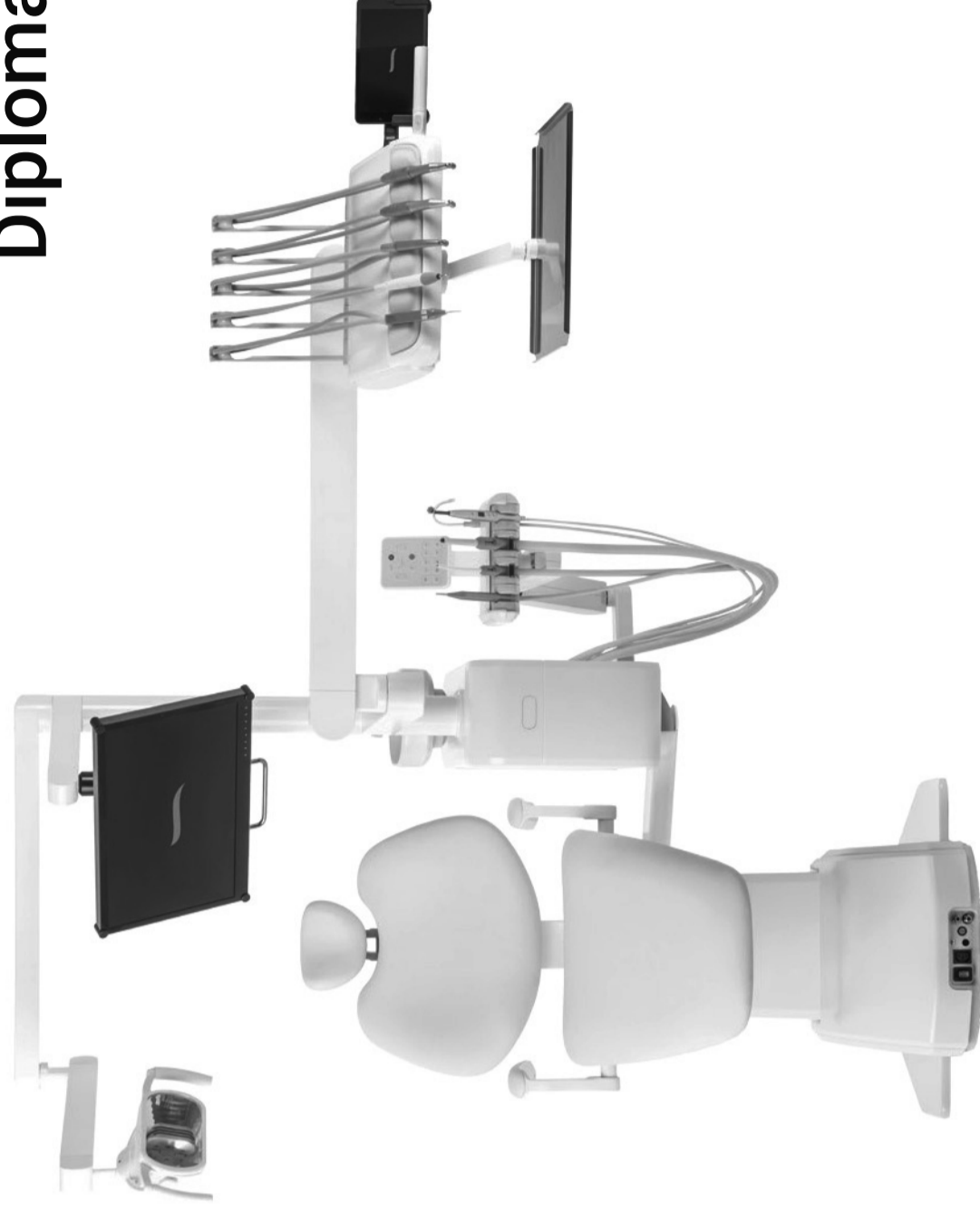




Первая в мире полностью цифровая стоматологическая установка. Разработана командой исследователей и специалистов в области эргономики и новых технологий.


ЭТО КАК ЕСЛИ БЫ, В КАБИНЕТЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СОТРУДНИК.



**Model Pro
Diplomat Consul DC 310
первая полностью
цифровая
установка в мире.**

Используйте интегрированный
интерфейс Sопnect App
для доступа к данным пациента,
автоматизации настроек
инструментов установки.

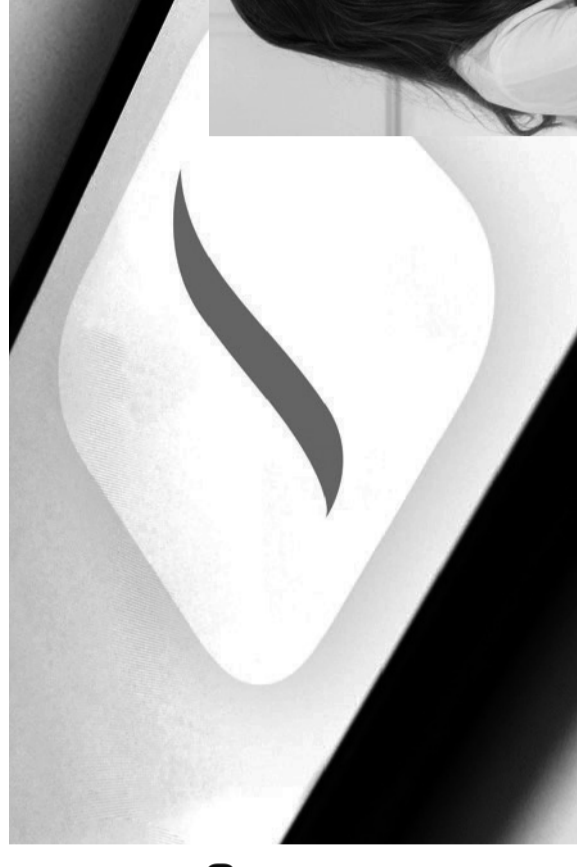

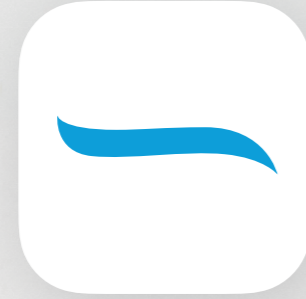

Используйте интегрированный интерфейс Connect App для доступа к данным пациента, автоматизации настроек инструментов установки.

„Diplomat Connect“ приложение

Умное приложение Интеграция

Приложение Connect интегрировано в Model Pro / Diplomat Consul DC 310 и помогает вам контролировать и автоматизировать настройки инструментов установки.

Беспроблемный рабочий процесс

Доступ к данным пациента, рентгеновским снимкам, фотографиям и многому другому одним нажатием кнопки. Перенастройка автоматического движения кресла с помощью программируемых контроллеров.

Техническая поддержка

Новая генерация цифровой поддержки. Мгновенная диагностика, удаленная поддержка и база данных инструкций и сервисных видео.

Дизайн соответствует инновациям

Diplomat Dental - это команда исследователей и специалистов в области эргономики и новых технологий

Стоматологическая установка для левшей и правшей



Простая Обратимость

Поверните слева
направо за
30 секунд





Мгновенная трансформация за 30 секунд.



Преобразование для работы под левую руку за 30 секунд - вместе со всеми инструментами. Поднимите сиденье, отпустите тормоз, поверните блок и снова затяните тормоз. Трансформация из правостороннего использования в левостороннее занимает всего 30 секунд.

Легкая трансформируемость не означает, что вам нужно идти на компромисс. Установка может быть оснащена любым количеством инструментов и приборами любой сложности - возможно все.

**Мягкость & прочность:
эргономика,
основанная на
передовых
исследованиях**



В разложенном положении кресла ноги пациента поддерживаются по всей длине, а удобно расположенные подлокотники позволят полностью расслабиться

Эргономичный дизайн для оптимального положения пациента.


Мы потратили много времени, проводя глубокие исследования эргономики пациента, и тщательно протестировали все модели и варианты установок. В результате наше кресло обеспечивает максимальный комфорт, снижая физическую нагрузку пациентов и их (плюс ваш!) уровень стресса. Например, знаете ли вы, что когда голова вашего пациента расслаблена, то же самое происходит и с его плечами и спиной?

Изученное до мельчайших деталей, ваше новое кресло позволит комфортно, но надежно располагать пациентов различных типов телосложения (рост, размер, вес) в течение продолжительного времени.





Простое движение

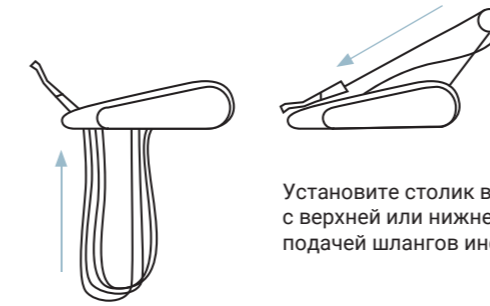

Установите столик врача с верхней или нижней подачи шлангов инструментов.

Вот некоторые из замечательных функций, которые сделают ваш день проще.

Плавное движение. Благодаря использованию пневматической пружины в пантографических плечах и подшипников во вращающихся частях, движение на удивление плавное и приятное.

Обратного сопротивления нет. Совершенно новый дизайн держателей инструментов с верхней подачей шлангов избавляет от нагрузки ваши руки - нет обратного натяжения шлангов.

Устойчивость и прочность. Вибрации, передаваемые с кресла к остальной части установки, сведены к минимуму.

Конструкция столика врача, доступная в версии с пятью инструментами, гарантирует интуитивную и плавную работу со всеми инструментами, расположенными «под рукой». Выбрать верхнюю или нижнюю подачу шлангов инструментов - решать только вам.



Рабочее пространство

Места более чем достаточно для работы нескольких человек около кресла



Наблюдение и руководство вашим ассистентом или всей хирургической бригадой.

Мы также не забыли о вашей команде, независимо от того, это один помощник, который помогает вам с простыми пломбами, или команда, выполняющая сложную операцию в полости рта. Благодаря хорошо продуманной конструкции, места около кресла более чем достаточно для работы нескольких человек.


Подвижный кронштейн позволяет оптимально расположить аспирационные шланги или инструменты для любой процедуры.

На столике ассистента можно разместить до шести инструментов. Консоль может быть оснащена полноценным модулем управления со всеми необходимыми опциями для ассистента, чтобы облегчить работу стоматолога.

Пантографическая версия подходит для операций в две и четыре руки.

Простая сборка, меньше усилий при установке.

Не беспокойтесь о монтаже установки. Благодаря особой конструкции кресла, обновленные модели можно устанавливать без крепления к полу. Это решение идеально подходит для мест, где нельзя просверливать пол.

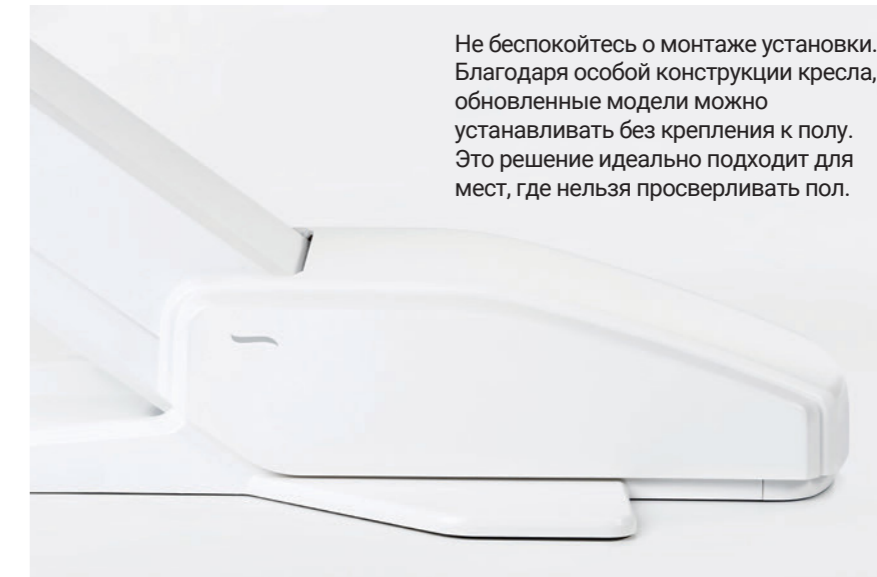



Упростите ежедневное обслуживание.

Model Pro 500 / Diplomat Consul DC 310 отлично подходит для выполнения любых задач. Отмеченные наградами дизайнеры, специалисты в области эргономики и инженеры позаботились также и о ежедневном обслуживании. Модель Pro может работать с любой системой всасывания. Доступны системы под сухое всасывание Cattani, Durg CS1 или сепараторы амальгамы Metasys MST1 или Durg CAS1. Системы под влажное всасывание WET, с использованием клапанов Durg, могут быть установлены так же. Всасывающие шланги могут быть оснащены двойным переключающим клапаном, благодаря работе которого активен только тот шланг, который используется. Система инфекционного контроля полностью интегрирована,


поэтому отсасывающие шланги можно промывать после каждого пациента, чтобы в считанные минуты подготовиться к следующему.

Простота использования, беспроблемное обслуживание. Фильтры всасывающей системы модели Pro легко доступны снаружи. Очистите и замените в течение 10 секунд. Нет центрального водоснабжения? Без проблем! Вам больше не нужно тянуться к бутылке с дистиллированной водой и прикасаться к ней - наполнение осуществляется сверху плевательницы. Доливать дистиллированную воду стало быстро и безопасно.



Перенесите свою клинику в 21 век.

Приложение Connect открыто для всех интеллектуальных инструментов, которые вам понадобятся в своей практике - сегодня или в будущем

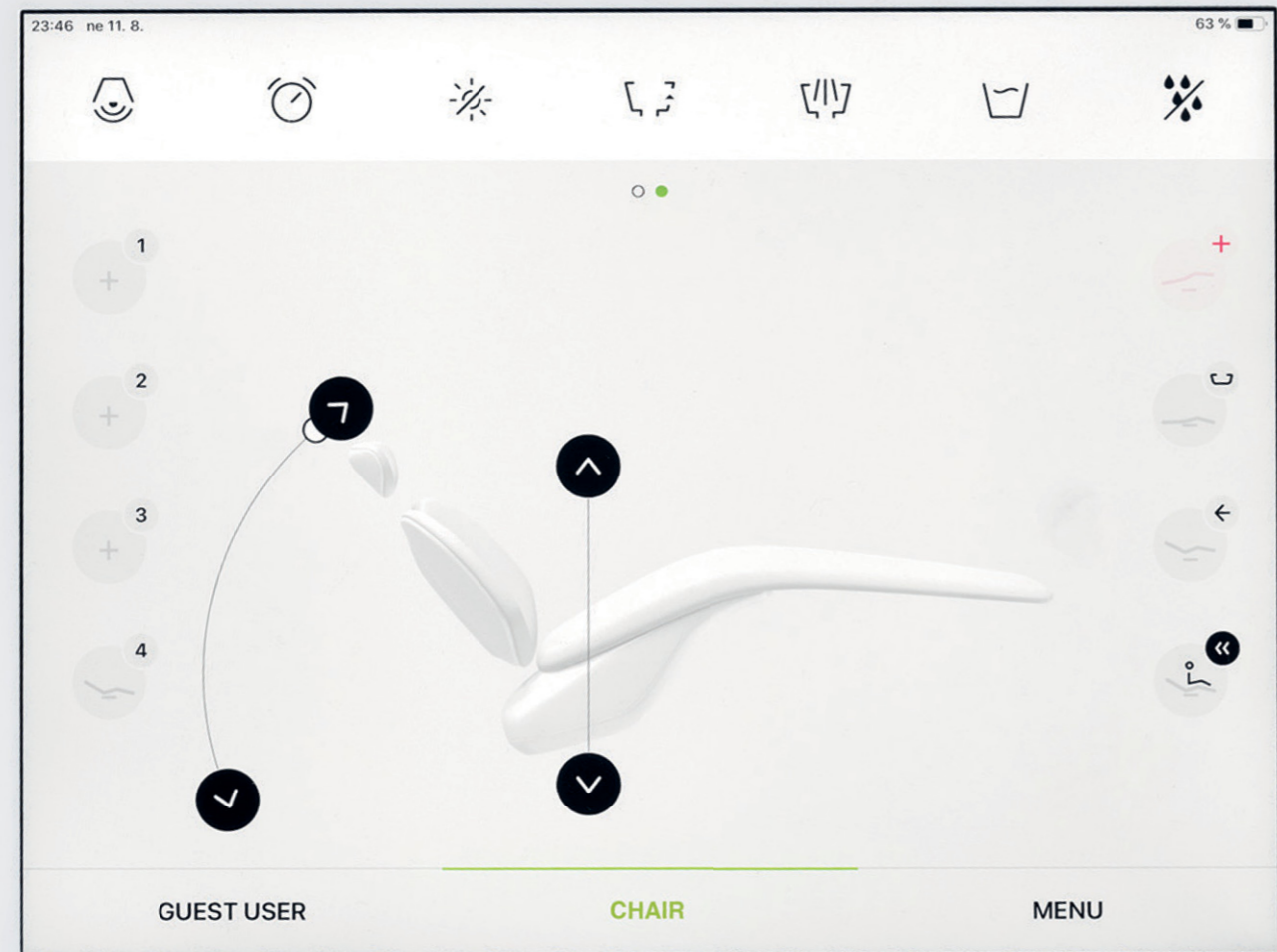

Загрузить и играть

1

Загрузите приложение
Diplomat Connect.

2

Активируйте Bluetooth.

3

Готово!
Ваша установка
готова к работе.



Приложение « Diplomat Connect » доступно для iPad в App Store или Android App в Google play.

Оцифруйте свою практику с помощью простого планшета и получите самую передовую и удобную систему управления стоматологическими установками, доступную на рынке.

Используйте свой планшет для управления стоматологическим устройством и инструментами. Полностью поддерживаются и Android и iOS. Резервное копирование данных в iCloud или Android. Автоматическое обновление, неограниченное количество пользователей и удобный интерфейс.



«Ориентированный на рабочий процесс, интеллектуальный, открытый и модульный - таковы руководящие принципы Model Pro».

"Наша философия состоит в том, чтобы сосредоточиться на открытых платформах, модульных и интеллектуальных решениях, улучшающих рабочий процесс стоматологического кабинета - сделать передовые технологии и интеллектуальные инструменты простыми в использовании и доступными каждому стоматологу "

Tomas Nerad, CEO - Diplomat Dental



DIPLOMAT DENTAL SOLUTIONS

« Обнаружить удовлетворение »



DIPLOMAT
DENTAL
SOLUTIONS

DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
Slovak republic

T 00421 33 79 54 111
F 00421 33 77 26 326

info@diplomat-dental.com
www.diplomat-dental.com



EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o.
Športová 503, 916 01 Stará Turá
Slovak republic

Office
Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
Slovak republic

T 00421 33 79 54 820-5
F 00421 33 79 54 809

cis@eur-med.sk
www.eur-med.sk

дилер: